


02.

EXTRACORONAL ATTACHMENTS

PRECI-VERTIX®
РУССКО

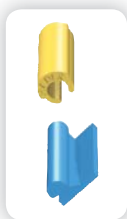

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

ПРЕЦИ-ВЕРТИКС

- ✓ Легко обрабатываются
- ✓ Эстетичны: могут быть использованы во фронтальных областях
- ✓ Минимальный объем работы
- ✓ Используются с любым литьем
- ✓ Недорогие
- ✓ Очень удобны для пациентов
- ✓ Используются клиниками уже больше 40 лет



фрикция

ПРЕЦИ-ВЕРТИКС гарантирует долгосрочную ретенцию, непревзойдённую латеральную стабильность протеза. Эластичные матрицы легко снимаются и доступны с 3 фрикционными показателями (показателями эластичности).



Введите матрицы параллельно опорному зубу.
Патрицы могут быть укорочены не более чем на 3 мм.
Рекомендуется использовать разгрузочную балку.
Сделайте отливку и завершите работу. Поместите жёлтую матрицу поверх матрицы и заблокируйте для дублирования модели все поднутрения.



Завершите дублирование и покройте воском замковое соединение. Покройте аттачмент воском. Запакуйте паковочной массой и сделайте отливку. Обработайте протез. Внутреннюю сторону металлического рукава нельзя полировать. Оставьте её обработанной пескоструйным аппаратом. Укоротите окклюзионную часть матрицы на 0,2 мм, чтобы предохранить аттачмент от окклюзионного давления.
С помощью ключа вдавите матрицу на металлическую матрицу.
Чтобы извлечь матрицу, используйте острый инструмент.
Подцепите и выньте матрицу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦИ-ВЕРТИКС КОЛПАЧКИ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНИКА РАБОТЫ:

Пластиковый колпачок, сгораемый без остатка, даёт наилучшее крепление матрицы в каркасе. оптимальную эстетику.



Закройте колпачок белой матрицей (арт. номер 1805).

Поставьте колпачок на правильную высоту и десневой контур.

Балка устанавливается прямо на колпачок. Приготовьте колпачок для облицовки фарфором или акрилом.

Установите вертикальный литник и удалите белую матрицу с колпачка при помощи острого инструмента. Запакуйте и сделайте отливку.

Нанесите облицовку. Соедините замковое соединение колпачка со слепком при помощи акрила или композиционного материала.

1801

**ПРЕЦИ-ВЕРТИКС СТАНДАРТ:**

6 патриц с добавленной опорой для
параллельного ввода
6 жёлтых матриц
1 ключ

1811


**ПРЕЦИ-ВЕРТИКС P:**

6 угловых патриц с улучшенным
контуром для десен
6 жёлтых матриц
1 ключ
1 параллелодержатель

1812

**ПРЕЦИ-ВЕРТИКС P КОМБИ:**

2 угловых патриц с улучшенным
контуром для десен
2 + 2 + 2 матрицы
2 пластиковых колпачка
1 ключ
1 параллелодержатель

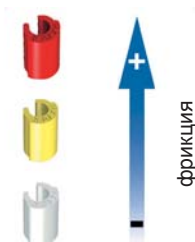ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ**Стандартная фрикция:**

1802 6 жёлтых матриц

1802B 50 жёлтых матриц

Уменьшенная фрикция:

1805 6 белых матриц

1805B 50 белых матриц

Увеличенная фрикция:

1806 6 красных матриц

1806B 50 красных матриц

Комбинированная упаковка:

1807 2 ж + 2 к + 2 б

1807B 25 ж + 15 к + 10 б

ПРЕЦИ-ВЕРТИКС КОЛПАЧКИ

1808 6 колпачков для литья

1808B 50 колпачков для литья

CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADICULAR
PRECI-BALL

01.
**AXIAL
ATTACHMENTS**

CEKA EXTRACORONAL
CEKA ID
PRECI-VERTIX
PRECI-VERTIX AT
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52
PRECI-TUBIX/MORTIX

02.
**EXTRACORONAL
ATTACHMENTS**

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

03.
**PROFILE
ATTACHMENTS**

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKALLOY
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO

SPECIALTIES

WWW.CKPL.EU

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE



Prospectus n° **262.RU-ed.B**

© Copyright ALPHADENT NV 10/2011 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium

T +32 56 629 100 - **F** +32 56 629 101 - **E** info@ckpl.eu

