

3M ESPE

Лучшее стало наилучшим



2628 348 001AA2
74672 8 4847562902847
Ketac™
OH

Molar Easymix

Новый гранулированный стеклоиономерный материал

Кетак™ Моляр Изимикс обладает высокой прочностью на сжатие и на изгиб, противодействует давлению, предотвращая, таким образом, разрушение реставрации.


- Новая гранулированная формула делает материал более легким в обращении.
- Благодаря повышенной гигроскопичности порошка, смешивание стало более простым и быстрым.
- Сыпучесть порошка позволяет равномерно дозировать материал, что гарантирует более точные и воспроизводимые результаты смешивания.
- Гранулированный порошок не выделяет пыли, благодаря чему улучшается гигиена рабочего места.

Кетак™ Моляр Изимикс - ЭТО


Все свойства стеклоиномера

- Высокая прочность на изгиб - соответственно пониженная вероятность повреждения реставрации
- Адгезия к эмали и дентину - прекрасно подходит для минимально инвазивной стоматологии и техники АРТ
- Длительное выделение фтора
- Низкий уровень кислотной эрозии - отлично сохраняется краевое прилегание реставрации
- Четыре оттенка (А1, А3, А4 и В2)
- Рентгеноконтрастность
- Экономичность

Прочность на сжатие в соответствии со стандартом ISO 9917 в МПа

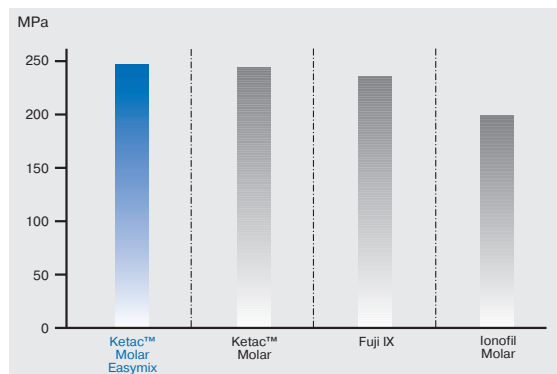

Прочность на изгиб в МПа

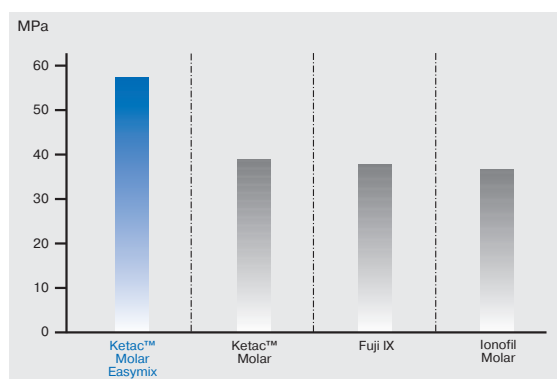


ПЛЮС... новая гранулированная формула, что выражается в более четкой дозировке и упрощенном смешивании.



Гранулированный порошок **Кетак™ Моляр Изимикс** обладает высокой сыпучестью, что обеспечивает более точную и воспроизводимую дозировку.



Обычный стеклоиномерный порошок при хранении иногда склеивается; таким образом, дозировка не всегда точная.

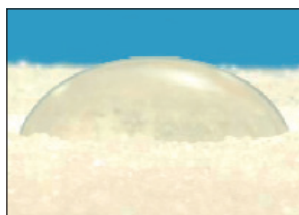

Кетак™ Моляр Изимикс отличается значительно улучшенной гигроскопичностью, что обеспечивает более быстрое и простое смешивание.



Обычные стеклоиномерные материалы не обладают способностью к быстрому впитыванию жидкости, соответственно - не являются столь легкими в применении.

Каковы же различия между Кетак Моляр Изимикс и другими стандартными стеклоиномерными материалами, в том числе Кетак Моляром? Самое главное - это усовершенствованная гранулированная формула, а также:

- Кетак Моляр Изимикс более сыпучий, что позволяет достичь более точного соотношения порошок/жидкость и повышает надежность и постоянство результатов.
- Более гигроскопичный: жидкий компонент впитывается быстрее и равномернее; таким образом, смешивание происходит быстрее и проще.
- Более простой в обращении: менее вязкий и производит намного меньше пыли, чем конкурирующие стеклоиномерные материалы.

По сравнению с материалами других производителей Кетак™ Моляр Изимикс:

• Более прочный и долговечный

Стеклоиономер Кетак™ Моляр Изимикс показывает пониженные уровни кислотной эрозии по сравнению с конкурирующими стеклоиономерными материалами.


• Более гигиеничный

По мнению 72% стоматологов, принявших участие в тестировании, Кетак™ Моляр Изимикс более гигиеничен, чем материал Fuji IX. 86% опрошенных подтвердили, что Кетак Моляр Изимикс производит меньше пыли, чем Fuji IX GP™ Handmix.

• Обладает высокой износостойкостью

Несмотря на легкое смешивание и простоту в использовании, Кетак™ Моляр Изимикс отличается такой же высокой износостойкостью, как и другие стеклоиономерные материалы.

• Проще смешивается

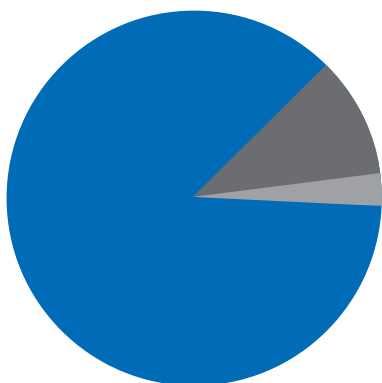

86% утверждают, что стеклоиономер Кетак™ Моляр Изимикс проще смешивать.

11% - Кетак™ Моляр Изимикс так же легко смешивать, как и Fuji IX.

3% - Кетак™ Моляр Изимикс труднее смешивать, чем Fuji IX.

Превосходные результаты в минимально инвазивной стоматологии и технике АРТ

Помимо простоты в использовании, по своим показаниям и методикам применения материал Кетак™ Моляр Изимикс отлично подходит для минимально инвазивной стоматологии и техники АРТ. Кетак™ Моляр Изимикс обладает качествами самоадгезии и не требует дополнительной адгезивной обработки. Полость после препарирования обрабатывается, чтобы подготовить ее для внесения реставрационного материала. Кетак™ Моляр Изимикс проявляет адгезию не только к дентину, но и к эмали, снижая тем самым просачивание микробактерий. Материал также выделяет фтор.



Кетак™ Моляр Изимикс предназначен для:

- Создания прокладки под композитные или амальгамовые реставрации
- Восстановления культи
- Реставрации молочных зубов
- Реставраций I и II классов (без бугров)
- Пришеечные реставрации без косметических приоритетов

Минимально инвазивная стоматология, включая технику АРТ

- Реставрация молочных зубов
- Полупостоянные реставрации III и V классов молочных и постоянных зубов
- Герметизация фиссур

Ketac™ Molar Easymix

КЕТАК МОЛЯР ИЗИМИКС

Два наиболее часто задаваемых вопроса, ответы на которые помогут в достижении высоких результатов и понимании всех особенностей материала.

Вопрос: Можно ли смешивать жидкость Кетак Моляр (Ketac Molar) с порошком Кетак Моляр Изимикс (Ketac Molar Easymix)?

Ответ: Нет. Порошок Кетак Моляр Изимикс должен использоваться только с жидкостью Кетак Моляр Изимикс. Если порошок Кетак Моляр Изимикс смешивается с другими жидкостями, кислотная концентрация реставрационного материала изменяется, что может привести к послеоперативной чувствительности. Кроме того, это ослабляет механические свойства материала и понижает скорость застывания.

Вопрос: Можно ли смешивать жидкость Кетак Моляр Изимикс (Ketac Molar Easymix) с порошком Кетак Моляр (Ketac Molar)?

Ответ: Нет. Жидкость Кетак Моляр Изимикс следует смешивать только с порошком Кетак Моляр Изимикс.



Информация для заказа:

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СОСТАВ
56623	Начальный набор (Introductory Kit) 1 - 12,5 г порошка каждого оттенка А1, А3, А4, В2, 2 - 8,5 г жидкость, 1 - 10мл Кетак Кондиционер, 1 - Кетак Глейз, 1 - ложка, 1 - блокнот для смешивания, 25 - дозаторов, 82 - щетки, 1 - щеткодержатель
56632	Учебный набор (Starter Pack) 1 - 12,5 г порошка А3, 1 - 8,5 мл жидкости, 1 - Кетак Кондиционер, 1 - Кетак Глейз, 1 - ложка, 1 - блокнот для смешивания, 15 - дозаторов
56633	Набор для минимально инвазивной стоматологии, включая технику АРТ 1 - 12,5 г порошка А3, 1 - 8,5 мл жидкости, 1 - ложка, 1 - блокнот для смешивания, 2 - инструкции по технике АРТ
56625	Рефил порошок - Оттенок А3 1 - 12,5 г порошка А3, 1 - ложка
56628	Рефил жидкость 1 - 8,5 мл жидкости



Кетак Моляр Изимикс.
Начальный набор 56623



Кетак Моляр Изимикс.
Учебный набор 56632

Пломбировочный стеклоиономерный материал Кетак Моляр Изимикс разработан с учетом всех требований стоматологов к стеклоиономеру ручного смешивания.

3M ESPE

3M Украина
3M ESPE стоматологическая продукция
03680, Киев, ул. Физкультуры, 30-В
тел.: (044) 490-5777, факс: (044) 490-5775

348001AA222

3364

