A close-up photograph of a yellow and black power drill bit. The bit is positioned diagonally, with its tip pointing towards the upper left. A white ruler is visible in the background, slightly out of focus. The lighting is bright, highlighting the textures of the plastic and metal components. The overall composition is clean and professional.

**Простота,
основанная на
качестве**

Информация для заказа:

Артикул Комплектация

RelyX™ U200 Clicker™

- 56877 RelyX™ U200 Clicker™:**
1 «Кликер», цвет прозрачный (11 г), 1 блокнот для смешивания
- 56878 RelyX™ U200 Clicker™:**
1 «Кликер», цвет А2 универсальный (11 г), 1 блокнот для смешивания
- 56879 RelyX™ U200 Clicker™:**
1 «Кликер», цвет А3 opak (11 г), 1 блокнот для смешивания

RelyX™ U200 Automix

- 56897 RelyX™ U200 Automix:**
1 шприц, цвет прозрачный (8,5 гр); 10 обычных насадок RelyX™ U200 Automix; 5 широких насадок RelyX™ U200 Automix; 5 эндо-насадок RelyX™ U200 Automix
- 56895 RelyX™ U200 Automix:**
1 шприц, цвет А2 универсальный (8,5 гр); 10 обычных насадок RelyX™ U200 Automix; 5 широких насадок RelyX™ U200 Automix; 5 эндо-насадок RelyX™ U200 Automix
- 56896 RelyX™ U200 Automix:**
1 шприц, цвет А3 opak (8,5 гр); 10 обычных насадок RelyX™ U200 Automix; 5 широких насадок RelyX™ U200 Automix; 5 эндо-насадок RelyX™ U200 Automix

Артикул Комплектация

RelyX™ Fiber Post/RelyX™ U200 Automix

- 56911 Стартовый набор RelyX™ Fiber Post/RelyX™ U200 Automix:**
1 шприц, цвет А2 универсальный (8,5 гр); 5 обычных насадок RelyX™ U200 Automix; 15 широких насадок RelyX™ U200 Automix; 10 эндо-насадок RelyX™ U200 Automix; 5 интраоральных насадок RelyX™ U200 Automix; 20 штифтов RelyX™ Fiber Post, размеры 0-3; 5 боров RelyX™ FiberPost, размеры 0-3 и универсальный

Рефилы

- 56913 RelyX™ U200 Automix Mixing Tips:**
30 обычных насадок RelyX™ U200 Automix
- 56914 RelyX™ U200 Automix Mixing Tips:**
15 широких насадок RelyX™ U200 Automix; 15 эндо-насадок RelyX™ U200 Automix
- 56917 RelyX™ U200 Automix Mixing Tips:**
15 широких насадок RelyX™ U200 Automix; 15 интраоральных насадок RelyX™ U200 Automix



3M ESPE

ООО «3М Украина». 3M ESPE
Стоматологическая продукция
03680 Киев, Бизнес-центр «Горизонт Парк»
ул. Амосова, 12, корпус №1, 7 этаж
Тел.: (044) 490-5777,
факс: (044) 490-5775
<http://3mespe.com.ua>

3M, ESPE, Clicker и RelyX являются торговыми марками 3M или 3M Deutschland GmbH.
G-Cem, Maxcem Elite и SmartCem не являются торговыми марками 3M или 3M Deutschland GmbH.
© 3M 2012. Все права защищены

Цементы для фиксации

RelyX™ U200

Самоадгезивный композитный цемент



Прочная связь,
на которую Вы можете
положиться

3M ESPE

RelyX™ U200 – прочность, которой мы доверяем

Улучшенные рабочие характеристики, более легкое смешивание: RelyX™ U200 Самоадгезивный КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТ

RelyX U200 является новейшим поколением наиболее клинически проверенного самоадгезивного композитного цемента в мире. Продукт обладает улучшенными рабочими характеристиками: отличной адгезией к дентину, эмали и реставрациям, а также долгосрочной стабильностью и высокой стойкостью цвета.

Кроме того, благодаря новым технологиям RelyX U200 обеспечивает более легкое смешивание, являясь при этом невероятно простым в использовании, не требующим таких шагов предварительной обработки как протравливание, прайминг и бондинг.

Отличная прочность связи

Вы можете довериться качеству цемента RelyX U200 больше, чем когда-либо: по сравнению с другими самоадгезивными композитными цементами, RelyX U200 показывает лучшую адгезию – как к дентину, так и к эмали. Прочность связи RelyX U200 сравнима с многошаговыми композитными цементами - и без использования бондинговой системы. Пациенты будут довольны долговечной и надежной реставрацией.





Идентичный RelyX™ Unicem 2 Automix



Первое поколение RelyX™ Unicem
www.dentaladvisor.com



www.dentaltown.com

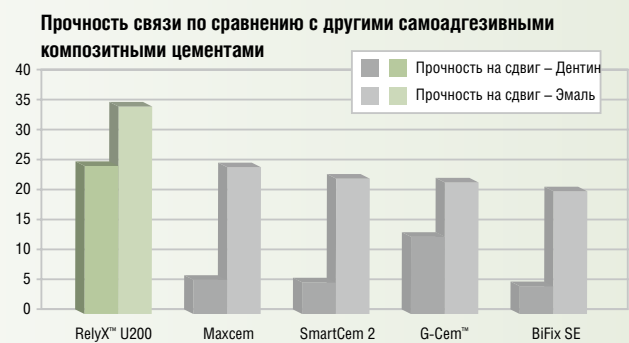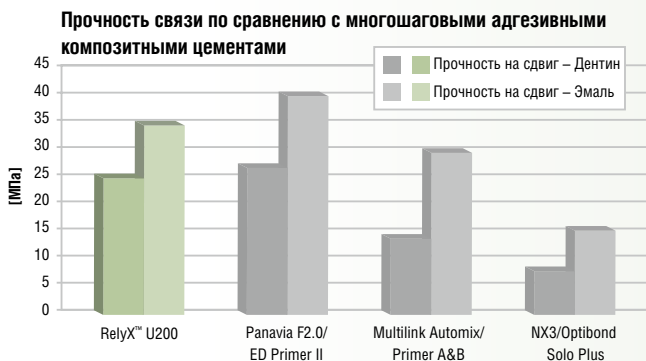

Прочность на сдвиг RelyX U200 к зубу по сравнению с многошаговыми адгезивными композитными цементами, которые использовались с их рекомендованной адгезивной системой, и самоадгезивными композитными цементами.

Источник: Внутренние данные 3M ESPE

	До	После
RelyX™ U200		
Maxcem Elite™		
SmartCem® 2		
G-Cem™		

Высокая стойкость цвета для натуральной эстетики

Пациентам понравится высокая стойкость цвета RelyX U200. Он показал наименьшую степень изменения цвета после трех дней в кофейном растворе, по сравнению с другими ведущими продуктами.

Исследуемые образцы после 3 дней проведенных в кофейном растворе при температуре 36°C
Источник: Внутренние данные 3M ESPE (исследуемые цвета - A2 или желтый)

RelyX™ U200 – простота в работе

RelyX U200 – фиксация может быть такой легкой!



Самоадгезивность

- Отличные результаты без какой-либо предварительной подготовки поверхностей зуба
- Экономит время по сравнению с многошаговыми композитными цементами

Назначения:

Цемент RelyX™ U200 показан для постоянной фиксации:

- Коронки, мостовидных протезов, вкладок, накладок из керамики, металлов и композитных материалов
- Всех видов штифтов и культовых вкладок
- Мерилендские мостовидные протезы протяженностью 2-3 единицы
- Мостовидные протезы на вкладках/накладках протяженностью 3 единицы
- Фиксация цельнокерамических, композитных, металлических реставраций на абатменты имплантатов

Дополнительные характеристики:

- Толерантность к влаге
- Двойное отверждение
- Очень легкое удаление излишков
- Минимальный риск возникновения постоперативной чувствительности
- Отличные механические свойства

Удобная форма подачи материала – диспенсер «Кликер»

- Очень легкое смешивание и превосходные рабочие характеристики благодаря оптимизированной реологии и надежному дозированию 1:1
- Гибкость в дозировании
- Экономическая эффективность – нет необходимости в дополнительных аксессуарах и компонентах
- Экономия времени за счет синхронного дозирования
- Экономный расход материала

Легкий в использовании шприц для автоматического смешивания

- Удобство в работе
- Оптимальная консистенция для выдавливания из шприца и посадки конструкции
- Большой выбор насадок, что позволяет легко вносить пасту непосредственно в полость
- Низкий уровень риска возникновения пузырьков воздуха и пустот

Насадки для RelyX™ U200 Automix



Шаг за шагом к идеальной фиксации

Сравнение шагов фиксации цельнокерамических реставраций высокой прочности

Этапы реставрации	Адгезивная фиксация с использованием техники тотального протравливания	Адгезивная фиксация с RelyX™ U200
1. Исходная ситуация: Временные коронки удалены и культи очищена.		
2. Применить раббердам. Не обязательно для RelyX U200™.		
3. Протравить гелем фосфорной кислоты.		Этап отсутствует
4. Тщательно промыть водой.		Этап отсутствует
5. Аккуратно просушить воздухом.		Этап отсутствует
6. Нанести праймер одноразовым аппликатором и легко его втереть.		Этап отсутствует
7. Легко просушить праймер воздухом.		Этап отсутствует
8. Нанести бонд одноразовым аппликатором и легко его втереть.		Этап отсутствует
9. Слегка выровнять и просушить адгезивный слой струей воздуха.		Этап отсутствует

Этапы реставрации	Адгезивная фиксация с использованием техники тотального протравливания	Адгезивная фиксация с RelyX™ U200
10. Светополимеризовать адгезив при наличии указаний.		Этап отсутствует
11. Произвести пескоструйную обработку внутренней поверхности коронки, прочистить и просушить.		
12. Кондиционировать внутреннюю поверхность циркониевым праймером.		Этап отсутствует
13. Внести цемент на блокнот для замешивания.		
14. Внести второй компонент на блокнот для замешивания.		Этап отсутствует
15. Смешать цемент.		
16. Нанести цемент на препарированную реставрацию или препарированный зуб.		
17. Установить реставрацию, светополимеризовать или дождаться самополимеризации (преполимеризовать при необходимости), удалить излишки.		
18. Финальная ситуация: Керамическая коронка, зафиксированная адгезивным методом.		