

Filtek™ Bulk Fill

Жидкотекучий композитный материал



Монопорционная методика для быстрой и удобной реставрации



Преимущества:

- Быстрая процедура за счет внесения материала одним слоем до 4 мм, не требуется послойное внесение
- Низкий полимеризационный стресс
- Легкая адаптация материала
- Не вытекает из полости
- Рентгеноконтрастность

Назначение:

- Базовая прокладка под прямые реставрации полостей I и II класса с возможностью объемного внесения материала
- Лайнерная прокладка под прямые реставрации

Жидкотекучий реставрационный материал Filtek™ Bulk Fill разработан для более быстрой и удобной реставрации жевательной группы зубов. Удобное и легкое внесение материала слоем до 4 мм уменьшает количество этапов реставрации и сокращает время, проводимое пациентом в кресле стоматолога.

Текучесть материала обеспечивает легкую адаптацию к стенкам полости с минимальным использованием инструментов и хорошее краевое прилегание без образования пустот. Материал обладает свойством тиксотропности и не стекает со стенок полости, что особенно важно при реставрации зубов верхней челюсти.

Материал Filtek™ Bulk Fill по сравнению с конкурентными жидкотекучими композитными материалами, вносимыми большой порцией, обладает большей прочностью и лучшей износостойкостью.

Компрессионная прочность на сжатие

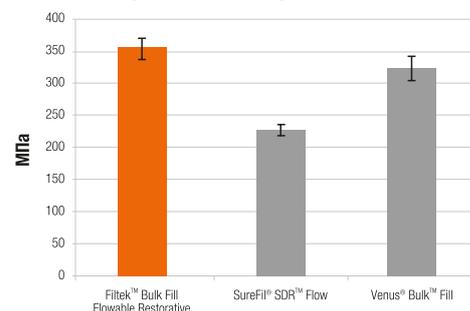


Рис. 1 Более высокая прочность на сжатие материала Filtek™ Bulk Fill в сравнении с другими жидкотекучими материалами, вносимыми большой порцией.

Скорость износа

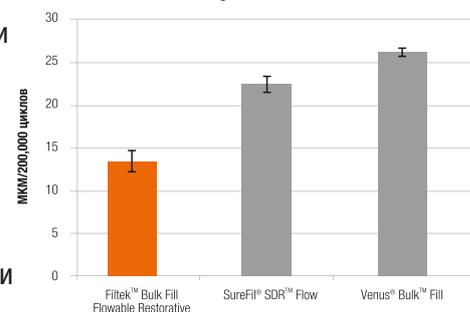


Рис. 2 Меньший износ материала Filtek™ Bulk Fill в сравнении с другими жидкотекучими материалами, вносимыми большой порцией.

Источник: внутренние данные компании 3М

Клинический случай: Эстетико-функциональное восстановление полостей I класса по Блеку с использованием жидкотекучего композитного материала Filtek™ Bulk Fill.

Клинический случай предоставлен доктором медицинских наук, профессором Гильмияровым Э. М.



Рис. 1
Исходная ситуация:
Кариез дентина (К 02.1)
зуба 46 и 47, I класс по Блеку.



Рис. 2
Вид полостей после проведения некрэктомии.



Рис. 3
Внесение жидкотекучего композита Filtek™ Bulk Fill оттенка А2 одной порцией в полость зуба.



Рис. 4
Порционное внесение нанокompозитного материала Filtek™ Ultimate оттенков А2В и А1Е.



Рис. 5
Окончательный вид реставрации зубов 46, 47 через 3 дня.

Информация для заказа

Артикул Комплектация



Форма выпуска шприцы

4862A1	2 шприца по 2 г, оттенок А1 20 насадок-аппликаторов
4862A2	2 шприца по 2 г, оттенок А2 20 насадок-аппликаторов
4862A3	2 шприца по 2 г, оттенок А3 20 насадок-аппликаторов
4862U	2 шприца по 2 г, оттенок универсальный 20 насадок-аппликаторов



Форма выпуска капсулы

4861A1	15 капсул по 0,2 г, оттенок А1
4861A2	15 капсул по 0,2 г, оттенок А2
4861A3	15 капсул по 0,2 г, оттенок А3
4861U	15 капсул по 0,2 г, оттенок универсальный

Принадлежности

3740Т	Насадки-аппликаторы для шприца с материалом, 20 шт.
-------	---

3M ESPE

Материалы для стоматологии 3M Россия

121614, Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3mespe.ru

Клиентский центр
192029, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 3/А, 5-й этаж
БЦ «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр
620014, Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, 1а,
БЦ «Президент», 11 этаж
Тел.: +7 (343) 228 2288
Факс: +7 (343) 228 2299

3M, ESPE, Filtek являются зарегистрированными товарными знаками компании 3M и 3M Deutschland GmbH. SDR, SureFil, Venus не являются зарегистрированными товарными знаками компании 3M и 3M Deutschland GmbH. © 3M 2014. Все права защищены.